



TECHNICAL DATASHEET

IM-30-04/1

Edition: 28/03/12

Page: 1 Of 1


PRODUCT NAME:

THREE PANELS KNEE IMMOBILIZATOR 0°– Orthesis and Knee Immobilizers

REFERENCE:

IR-4000 (40 cm)
IR-5000 (50 cm)
IR-6000 (60 cm)
IR-7000 (70 cm)

SIZES:

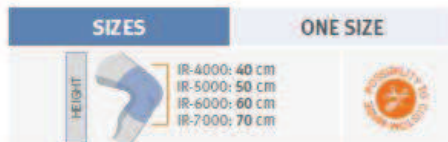

MANUFACTURER:

ORLIMAN, S.L.U. CIF: B-96122510
C/ AUSIAS MARCH Nº 3. POLIGONO INDUSTRIAL LA POBLA – L'ELIANA.
46185 LA POBLA DE VALLBONA – VALENCIA – SPAIN
SPANISH MEDICAL DEVICE OPERATION LICENCE NUMBER: 20-PS

PRODUCT CLASSIFICATION (Council Directive 93/42/EEC (as amended by Council Directive 2007/47/EC))

CLASS: I – (Rule 1)

Manufacturing type: Mass-Produced

PRODUCT CHARACTERISTICS:

Knee immobilizer with exterior velour fabric and interior cotton bouclé with lateral and rear shapeable plates. The three-panel adjustment system enables adaptation to different anatomies. With fastening straps in the interior panel to avoid sliding.

Colours: Beige

PRODUCT PICTURE:



INDICATIONS:

- Pre and post-surgical knee treatment.
- After injury or fractures.
- Immobilisation of the entire leg and permanently maintaining the position.

MATERIALS:

- Components: LATEX FREE.
- Structure materials: Composition: Inside: Cotton 85%, Polyamide 15%. Intermediate: Polyester 100%. Outside: Polyamide 100%.
- Extra-structure materials: Metal strips: Aluminium.
- Fastening or catch elements, if there are any: straps and Velcro closure.

RECOMMENDATIONS FOR PRESERVATION AND CLEANING

Stick the velcros to each other (if the orthesis has any), wash periodically by hand with a damp cloth and a neutral soap. To dry the orthesis, use a dry towel to absorb most of the dampness and leave to dry at room temperature. Do not hang up or iron and do not expose to direct heat sources such as stoves, heaters, radiators, direct sun light etc. During use or during washing do not use alcohols, ointments or dissolvent liquids. If the orthesis is not properly dried any detergent residues could irritate the skin and deteriorate the product.



ADDITIONAL INFORMATION:

Guarantee: 6 month.



Difarza, s.l. CIF B96386875 Tel.: 963363215 Fax: 963671551
email: disalud@ono.com
www.disalud.com

C/Río Ulla, 5 (entrada por Juan Verdeguer, 25) 46024 Valencia.
Empresa colaboradora de servicios médicos y de prevención de riesgos.
Distribución de productos sanitarios, clínicos y ortopédicos desde 1980.
Prevención, Seguridad y Salud Laboral.



www.disalud.com



www.farmaciadisalud.com



DiSaludGrupoenValencia



@disalud